

Nieuw bij Dyna Dental: PrimeLOC™

Beste relatie,


Wij willen u informeren dat Dyna Dental distributeur is van de PrimeLOC producten! Ons nieuwe assortiment abutments combineert betaalbare prijzen met hoogwaardige kwaliteit. Tevens zijn de PrimeLOC abutments compatibel met de producten van Zest Locator. We zetten alle USP's van PrimeLOC graag voor u op een rijtje:

- Uitwisselbaar met Zest Locator
- Aantrekkelijk geprijsd
- Europese productie
- Te gebruiken met de Dyna Hexdriver

Rechte abutments:

- Meerdere hoogtes (1 t/m 5mm)
- Bestaand uit slechts 1 deel
- Extreem slijtvaste multilayer coating

(Vickers Hardness Locator 2200, PrimeLOC 3200 ± 300)

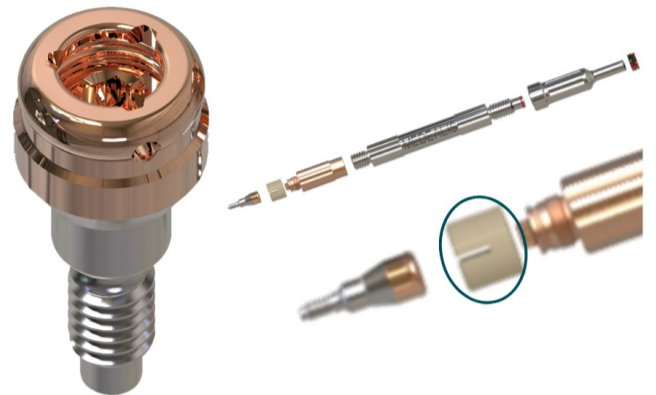

Gehoekte 18° abutments:


- Meerdere hoogtes (1 en 3mm)
- Oplossing voor divergenties tot 65°
- Extreem slijtvaste multilayer coating

Dyna Locator abutment with octa

Art. no	DY0001.H.P	DY0002.H.P	DY0003.H.P	DY0004.H.P	DY0005.H.P	DY0701.H.P	DY0703.H.P	A0140.P
Hoogte op PF4.0	1	2	3	4	5	1*	3*	*

PrimeLOC Rechte abutments

Deze abutments hebben een extra hexagonaal schroefmechanisme (Dyna Hex) waardoor het inbrengen in het implantaat wordt vereenvoudigd. Zo kunnen de rechte PrimeLOC abutments worden verwijderd of in positie worden geschroefd met behulp van de Dyna Hexdriver (5181S, 5181L en 5181C), de PrimeLOC Tri-Lobe Driver (A0022.P of A0023.P) of zelfs de Locator Square Driver 15mm (8926). Schroef het abutment op zijn plaats met een momentsleutel met 35 Ncm.

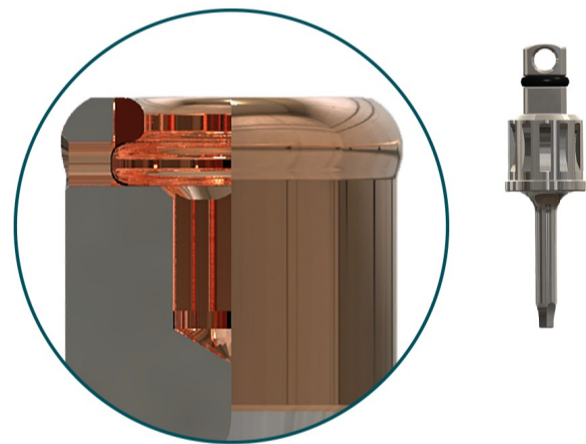

PrimeLOC Gehoekte 18° abutments

De 18° gehoekte PrimeLOC abutments hebben de Dyna Octalock verbinding en moeten met de PrimeLOC bevestigingsschroef M1.8 voor Dyna (A0140) op de implantaten worden aangesloten. Deze schroef kan worden verwijderd of zoals gebruikelijk in positie worden gebracht met behulp van de Dyna Hexdriver.

PrimeLOC Attachments

Naast de abutments kunt u bij Dyna Dental ook de attachments (retentie inserts) van PrimeLOC aanschaffen. U kunt de attachments van PrimeLOC bestellen via onze [webshop](#).



Voor meer informatie of het plaatsen van een bestelling, neemt u contact op met onze sales afdeling via sales@dynamental.com of bel 0164-258980.




Facebook



Website



LinkedIn

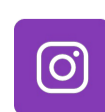

Instagram

Deze e-mail is verzonden aan [{{email}}](#).

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#).

U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#).

Voor een goede ontvangst voegt u sales@dynamental.com toe aan uw adresboek.